



“ಉತ್ತಮ ಶ್ರವಣ,
ಉತ್ತಮ ಜೀವನ.”

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

- 📍 ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570004
- @ jssish@jssonline.org
jssishmys@rediffmail.com
- ☎ 0821-2548229, 0821-2335014



ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ

ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ


ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570004

ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್
ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು



ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು

- ಆನ್/ಆಫ್: ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡಲು, ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು.
- ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ.
- ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಮಿನುಗುವ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಲೈಟ್ ಮಿನುಗಿದರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು.
- ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮೇಲಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಿ.
- ಇಯರ್ ಹುಕ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ .

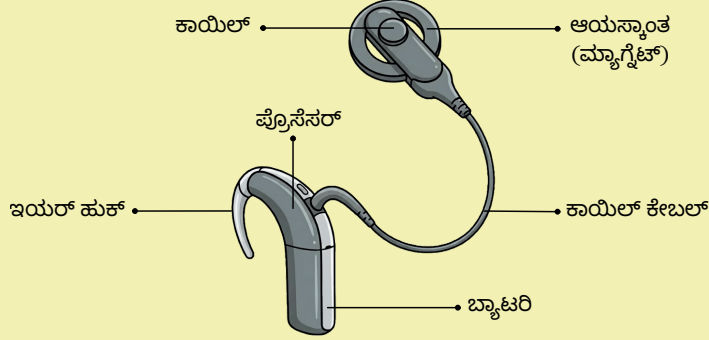


- ಆಯಸ್ಕಾಂತದ (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್) ಬಲವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಬಿಳಿಬಹುದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಲೆಯ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆಯಸ್ಕಾಂತದ (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್) ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್) ಬಳಸಿ.
- ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹೊಸ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಡಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬದಿಯು ಮೇಲ್ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಕಾಯಿಲ್ ಗೆ ಕೂರಿಸಿ.
- ಕಾಯಿಲ್ ಕೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುರಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಕೇಬಲ್ ಬದಲಿಸುವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಸಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ, ತಿರುಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ.


ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ - ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅದರ ಅಡಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ (ಅಡಪ್ಪರ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ , ರಿಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ(ಆಂಗಲ್) ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ , ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ . ಕೇಸರಿ ಲೈಟ್ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಹಸಿರು ಲೈಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ.




ಪರಿಕರಗಳ (ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್) ಬಳಕೆ:

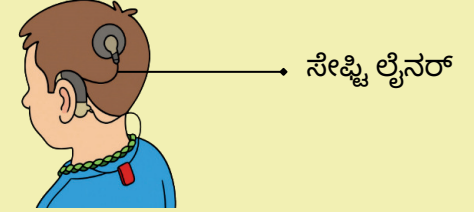

ಸೇಪ್ಪಿ ಲೈನರ್: ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೇಪ್ಪಿ ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಸೇಪ್ಪಿ ಲೈನರ್ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.

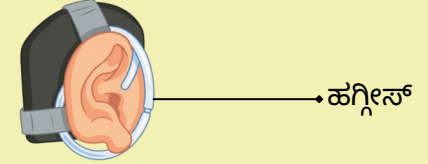

ಹಗ್ಗೀಸ್: ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಗ್ಗೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಹಗ್ಗೀಸ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.

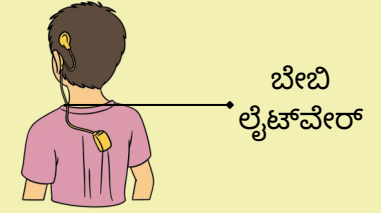

ಬೇಬಿ ಲೈಟ್ ವೇರ್: ಕಿವಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಮಗು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಬಿ ಲೈಟ್ ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು: ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

